



1-クロロブタンの  
チャイニーズ・ハムスター  
培養細胞を用いる  
染色体異常試験

厚生省生活衛生局 委託

財団法人食品薬品安全センター  
秦野研究所

## 【目 次】

	頁
要 約 -----	1
緒 言 -----	2
材料および方法 -----	3
1. 使用した細胞 -----	3
2. 培養液の調製 -----	3
3. 培養条件 -----	3
4. 被験物質および陽性対照物質 -----	3
5. 被験物質の調製 -----	4
6. 試験条件 -----	5
7. 細胞増殖抑制試験 -----	5
7.1 処理条件 -----	5
7.2 標本作製法 -----	6
7.3 増殖抑制の指標とその結果 -----	6
8. 本試験の群構成 -----	6
8.1 直接法 -----	6
8.2 代謝活性化法 -----	7
9. 染色体標本作製法 -----	7
10. 染色体分析 -----	8
11. 記録と判定 -----	9
結果および考察 -----	10
結 論 -----	10
特記事項 -----	11
文 献 -----	11

Tables 1～5, Figure 1

## 【要 約】

1-クロロブタンの染色体異常誘発能を、チャイニーズ・ハムスター培養細胞(CHL/IU、以下CHLと略す)を用いて検討した。

### 1. 細胞増殖抑制試験

直接法、代謝活性化法ともに、いずれの処理濃度群 (0.03~0.93 mg/ml) においても50%をこえる増殖抑制作用は認められなかった。

従って、染色体異常試験において、直接法 および代謝活性化法とも 0.93 mg/ml (10 mM) の処理濃度をそれぞれ高濃度とし、その1/2の濃度を中濃度、1/4の濃度を低濃度として用いた。

### 2. 染色体異常試験

直接法により、CHL細胞を24時間および48時間処理した結果、いずれの処理群においても、染色体の構造異常や倍数性細胞の誘発作用は認められなかった。

また、代謝活性化法におけるS9mix存在下および非存在下のいずれの濃度群においても、染色体の構造異常や倍数性細胞の誘発作用は認められなかった。

### 3. 結論

直接法により、CHL細胞を24時間 (0.23~0.93 mg/ml) および48時間処理 (0.23~0.93 mg/ml) した結果、すべての処理群において、染色体の構造異常や倍数性細胞の誘発作用は認められなかった。

また、代謝活性化法におけるS9mix存在下 (0.23~0.93 mg/ml) および非存在下 (0.23~0.93 mg/ml) のいずれの濃度群においても、染色体の構造異常および倍数性細胞の誘発作用は認められなかった。

従って、1-クロロブタンは、上記の試験条件下で試験管内のCHL細胞に染色体異常を誘発しないと結論した。

## 【緒 言】

OECD 既存化学物質安全性点検に係る毒性調査事業の一環として、1-クロロブタンの培養細胞に及ぼす細胞遺伝学的影響を評価するため、チャイニーズ・ハムスター培養細胞（CHL）を用いて試験管内染色体異常試験を実施した。

上記の試験は、「新規化学物質に係る試験の方法について」（昭和62年3月31日、環保業第 237号、薬発第 306号、62基局第 303号）および OECD ガイドライン：473に準拠し、化学物質 GLP（昭和59年3月31日、環保業第 39号、薬発第 229号、59基局第 85号、改訂昭和63年11月18日、環企研第 233号、衛生第 38号、63基局第 823号）に基づいて実施した。

## 【材料および方法】

### 1. 使用した細胞

リサーチ・リソースバンク (JCRB) から入手 (1988年2月、入手時：継代4代) したチャイニーズ・ハムスター由来の CHL 細胞を、解凍後継代10代以内で試験に用いた。この CHL 細胞株は、一般的に化学物質に対して検出感度が高いため常用されている。

### 2. 培養液の調製

培養には、牛胎児血清 (FCS: JRH BIOSCIENCES、ロット番号: 1C2073) を10% 添加したイーグル MEM 培養液を用いた。MEM 培養液は、イーグル MEM 培地「ニッスイ」①粉末 (日水製薬(株)) 9.4 g を 1 l の蒸留水に溶解し、121 °C で15分間、高圧蒸気滅菌したのち、L-グルタミン (滅菌済み、日水製薬(株)) 300 mg と 10% NaHCO<sub>3</sub> 溶液 12.5 ml を加えて調製した。2倍濃度の MEM 培養液は、上記の培地 9.4 g を 500 ml の蒸留水に溶解し、以下 MEM 培養液と同様に調製した。

### 3. 培養条件

2×10<sup>4</sup>個の CHL 細胞を、培養液 5 ml を入れたフラスコ (面積25 cm<sup>2</sup>、Corning) に播き、37 °C の CO<sub>2</sub> インキュベーター (5% CO<sub>2</sub>) 内で培養した。

### 4. 被験物質および陽性対照物質

[被験物質]	(	本試験データより)
(名 称)	1-クロロブタン (別名: n-ブチルクロライド)	
(略 号)	CB	
(CAS No.)	109-69-3	
(ロ ッ ト 番 号)		
(分 子 式)	C <sub>4</sub> H <sub>9</sub> Cl	
(分 子 量)	92.57	
(純 度)	99.5%以上 (不純物としてsec-ブチルクロライド0.3%以下)	
(性 状)	無色透明の液体で、水に0.08 wt %まで可溶、アセトンおよびジメチルスルホキシドに可溶、融点-123.1°C、沸点78.4°C、	

引火点 $-6.7^{\circ}\text{C}$ 、蒸気圧 $80.9\text{ mmHg}$  ( $20^{\circ}\text{C}$ ) の物質である。

(提 供 者)

(保 存 条 件) 冷暗所保存

(安 定 性) 安定性に関する情報なし。

(溶媒中での安定性) この物質は低沸点であるため、現在実施している分析操作  
方法と試験条件下では、揮発によるデータのバラツキが大きく  
評価に耐えうる結果を得ることができないと判断し、安定性  
試験は実施しなかった。

#### [陽性対照物質]

##### 1) 直接法の試験に用いる物質

(化 学 名) マイトマイシン C

(略 号) MC

(ロ ッ ト 番 号) 814 ABB

(製 造 者) 協和醗酵工業(株)

(保 存 条 件) 冷暗所保存

##### 2) 代謝活性化法の試験に用いる物質

(化 学 名) シクロホスファミド

(略 号) CPA

(ロ ッ ト 番 号) 67F-0155

(製 造 者) Sigma Chemical Co.

(保 存 条 件) 冷暗所保存

#### 5. 被験物質の調製

被験物質の調製は、使用のつど行った。また、調製および処理にあたっては、キャップ  
つきの器具を使用する等、揮発による処理条件の変化が少ないように注意して操作した。  
溶媒はアセトン (和光純薬工業(株)、ロット番号：DCK1899) を用いた。原体を溶媒に溶  
解して原液 (増殖抑制試験、染色体異常試験ともに $186\text{ mg/ml}$ ) を調製し、ついで原液を  
溶媒で順次希釈して所定の濃度の被験物質調製液を作製した。被験物質調製液は、全ての  
試験において培養液の $0.5\%$  (v/v) になるように加えた。染色体異常試験においては、直接

法および代謝活性化法における高濃度群および低濃度群について、被験物質調製液の含量測定を秦野研究所分析化学研究室において行った。その結果、調製液の濃度は、すべて許容範囲内（平均含量が添加量の85%以上）の値であった（Appendix 1）。

## 6. 試験条件

直接法では、細胞を3日間培養したのち培養液を捨て、フラスコに培養液 5ml と各濃度の被験物質調製液 25  $\mu$ l を加え、24時間および48時間処理した。

代謝活性化法では、細胞を3日間培養したのち培養液を捨て、MEM 培養液、2倍濃度の MEM 培養液、およびS9 mixをそれぞれ4:1:1の割合で混合した溶液 3ml をフラスコに加えた。また、S9 mix 非存在下の処理群においては、MEM 培養液 3ml をフラスコに加えた。その後、さらに 15  $\mu$ l の被験物質調製液を加えて6時間処理した。処理終了後、新鮮な培養液に交換し、更に18時間培養した。S9 mixの調製は下記の組成で行った。

---

S9*	3
20 mM HEPES (pH 7.2)	2
50 mM MgCl <sub>2</sub>	1
330 mM KCl	1
50 mM G-6-P	1
40 mM NADP	1
蒸留水	1
<hr/>	
合計	10 ml

---

\* S9 : Sprague-Dawley 系ラットにフェノバルビタールと 5,6-ベンゾフラボンを投与して調製したキッコマン(株)の S9 (ロット番号: RAA-281、1992年8月製造およびロット番号: RAA-285、1992年11月製造) を購入し、使用時まで-80℃の超低温槽内に保存した。

## 7. 細胞増殖抑制試験

染色体異常試験に用いる被験物質の処理濃度を決定するため、被験物質の細胞増殖に及ぼす影響を調べた。

### 7.1 処理条件

直接法では48時間処理群について、また代謝活性化法では、S9mix 存在下および非存在下の処理群について細胞増殖抑制試験を実施した。処理濃度は、培養液中での最終濃度が

直接法、代謝活性化法とも 0.03～0.93 mg/ml の範囲の濃度を用いた。フラスコは 1 濃度について 2 個用いた。

## 7.2 標本作製法

培養終了後、後述の染色体標本作製法と同様の方法で染色体標本を作製した。

## 7.3 増殖抑制の指標とその結果

被験物質の CHL 細胞に対する増殖抑制作用は、全細胞（800細胞）に占める分裂中期細胞の割合、すなわち分裂指数を計測し、被験物質処理群の溶媒対照に対する分裂指数の比をもって指標とした。

その結果、直接法、代謝活性化法ともに、いずれの処理濃度群（0.03～0.93 mg/ml）においても 50% をこえる増殖抑制作用は認められなかった。（Table 1、2、3 および Fig.1）。

## 8. 本試験の群構成

細胞増殖抑制試験の結果より、染色体異常試験で用いる被験物質の高濃度群を、直接法、代謝活性化法とも 0.93 mg/ml とし、それぞれ高濃度群の 1/2 の濃度を中濃度、1/4 の濃度を低濃度とした。陽性対照物質として用いた MC および CPA は注射用水（大塚製薬工場（株）、ロット番号：K1G70）に溶解して調製した。それぞれ染色体異常を誘発することが知られている濃度を適用した。

### 8.1 直接法

直接法では、3段階の被験物質処理濃度群に、対照群を含め下記の 11 群を設け、各群 2 個のフラスコを用いた。



群	濃度 (mg/ml)	処理時間 (hours)
1) 無処理対照	—	—
2) 溶媒対照	0	24
3) CB	0.23	24
4) CB	0.47	24
5) CB	0.93	24
6) 陽性対照 (MC)	0.00005	24
7) 溶媒対照	0	48
8) CB	0.23	48
9) CB	0.47	48
10) CB	0.93	48
11) 陽性対照 (MC)	0.00005	48

## 8.2 代謝活性化法

代謝活性化法では、3段階の被験物質処理濃度群に、対照群として S9mix を加えない群を含め、下記の 11 群を設け、各群 2 個のフラスコを用いた。

群	濃度 (mg/ml)	S9mixの有無	処理時間 (hours)
1) 無処理対照	—	—	—
2) 溶媒対照	0	—	6-(18)
3) CB	0.23	—	6-(18)
4) CB	0.47	—	6-(18)
5) CB	0.93	—	6-(18)
6) 陽性対照 (CPA)	0.005	—	6-(18)
7) 溶媒対照	0	+	6-(18)
8) CB	0.23	+	6-(18)
9) CB	0.47	+	6-(18)
10) CB	0.93	+	6-(18)
11) 陽性対照 (CPA)	0.005	+	6-(18)

## 9. 染色体標本作製法

- 1) 培養終了の 2 時間前に、コルセミドを最終濃度が約 0.1  $\mu\text{g/ml}$  になるように培養液に加え、培養終了後、各群の細胞をリン酸緩衝液 ( $\text{Ca}^{++}$ 、 $\text{Mg}^{++}$  を含まない) で洗い、

0.25% トリプシン溶液を用いてはがし、10 ml の遠沈管に集めた。

- 2) 1,000~1,200 rpm で5分間遠沈し、上清を捨てたのち、沈殿した細胞に3 ml の0.075M KCl 水溶液を加えることにより約30分間低張処理を行った。
- 3) 低張処理後、低張液の上層にカルノア液（氷酢酸：メタノール = 1：3 v/v）約6 ml を加え、下方から静かにピペティングしながら混和して固定し、その後1,000~1,200 rpm で5分間遠沈した。
- 4) 遠沈後上清を除き、再び新鮮なカルノア液を加えて細胞をピペティングにより再浮遊させ、1,000~1,200 rpm で5分間遠沈した。この操作を数回繰り返した。
- 5) 遠沈して得た白色の細胞塊に、0.2~0.5 ml のカルノア液を加え、十分に懸濁させた。
- 6) 細胞浮遊液の少量を、あらかじめ洗浄しておいたスライドグラス上に滴下し、そのまま風乾した。
- 7) スライド標本は各フラスコにつき6枚作製した。
- 8) スライドグラスのフロスト部分に鉛筆で、試験系識別番号、暗番号およびスライド番号を記入した。
- 9) 乾燥したスライドは、ギムザ原液（Merck）4.5 ml を M/15 リン酸緩衝液（pH 6.8）150 ml に希釈した染色液で約8分間染色後、蒸留水で軽くすすいで風乾した。
- 10) 染色したスライド標本は、暗番号順にスライドケースに入れ、ケースには試験系識別番号、標本作製の日付を明示して保存した。

## 10. 染色体分析

作製したスライド標本のうち、1つのフラスコから得られた異なるスライドを、複数の観察者がそれぞれ処理条件が分からないようにコード化した状態で分析した。よく広がり、かつ染色体が散逸していない分裂中期像を探し、異常を有する細胞については、スライド上のその位置を顕微鏡のステージの位置で記録用紙に記録した。

染色体の分析は、日本環境変異原学会、哺乳動物試験（MMS）分科会<sup>1)</sup>による分類法に基づいて行い、染色体型あるいは染色分体型のギャップ、切断、交換などの構造異常の有無と倍数性細胞（polyploid）の有無について観察した。また構造異常については1群200個、倍数性細胞については1群800個の分裂中期細胞を分析した。

## 11. 記録と判定

無処理対照、溶媒および陽性対照群と被験物質処理群についての分析結果は、観察した細胞数、構造異常の種類と数、倍数性細胞の数について集計し、各群の値を記録用紙に記入した。

染色体異常を有する細胞の出現頻度について、フィッシャーの Exact probability test 法により、溶媒対照群と被験物質処理群間および溶媒対照群と陽性対照群の有意差検定を行った。

被験物質の染色体異常誘発性についての判定は、石館ら<sup>2)</sup>の判定基準に従い、染色体異常を有する細胞の頻度が 5% 未満を陰性、5% 以上 10% 未満を疑陽性、10% 以上を陽性とした。

## 【結果および考察】

直接法による染色体分析の結果を Table 4 に示した。

CBを加えて24時間および48時間処理した各濃度群で、染色体の構造異常および倍数性細胞の出現頻度に有意な増加は認められなかった。

代謝活性化法による染色体分析の結果を Table 5 に示した。

CBを加えて S9mix 存在下および非存在下で6時間処理した各濃度群では、いずれも染色体の構造異常および倍数性細胞の出現頻度に有意な増加は認められなかった。

陽性対照として用いた直接法での MC 処理群、および S9mix 存在下での CPA 処理群では染色体分体交換 (cte) や染色体分体切断 (ctb) などの構造異常をもつ細胞が高頻度に誘発された。

## 【結 論】

直接法により、CHL 細胞を 24時間 (0.23~0.93 mg/ml) および48時間処理 (0.23~0.93 mg/ml) した結果、すべての処理群において、染色体の構造異常や倍数性細胞の誘発作用は認められなかった。

また、代謝活性化法における S9mix 存在下 (0.23~0.93 mg/ml) および非存在下 (0.23~0.93 mg/ml) のいずれの濃度群においても、染色体の構造異常および倍数性細胞の誘発作用は認められなかった。

従って、CBは、上記の試験条件下で試験管内の CHL 細胞に染色体異常を誘発しないと結論した。

## 【特記事項】

本試験の実施にあたり、試験の信頼性に悪影響を及ぼす疑いのある予期し得なかった事態及び試験計画書からの逸脱はなかった。

## 【文 献】

- 1) 日本環境変異原学会・哺乳動物試験分科会編：化学物質による染色体異常アトラス、朝倉書店 1988
- 2) 石館 基 監修：〈改訂〉染色体異常試験データ集、エル・アイ・シー社、1987

**Table 1** Mitotic indices of CHL cells treated with 1-chlorobutane ( CB )  
for 48 hours by direct method

Concentration of CB (mg/ml)	Mitotic indices (% of control)	
		Average
0.00	100.0, 100.0	100.0
0.03	156.5, 112.9	134.7
0.06	134.7, 77.4	106.0
0.12	117.3, 112.9	115.1
0.23	130.4, 93.5	111.9
0.47	121.7, 129.0	125.3
0.93	82.6, 93.5	88.1

Table 2 Mitotic indices of CHL cells treated with 1-chlorobutane ( CB )  
for 6 hours with S9 mix by metabolic activation method

Concentration of CB (mg/ml)	Mitotic indices (% of control)	
		Average
0.00	100.0, 100.0	100.0
0.03	78.6, 100.0	89.3
0.06	57.1, 63.6	60.4
0.12	66.7, 84.8	75.8
0.23	95.2, 90.9	93.1
0.47	35.7, 75.8	55.7
0.93	52.4, 69.7	61.0

Table 3 Mitotic indices of CHL cells treated with 1-chlorobutane ( CB )  
for 6 hours without S9 mix by metabolic activation method

Concentration of CB (mg/ml)	Mitotic indices (% of control)	
		Average
0.00	100.0, 100.0	100.0
0.03	86.2, 93.9	90.0
0.06	112.0, 118.3	115.1
0.12	108.6, 118.3	113.4
0.23	89.7, 79.6	84.6
0.43	101.7, 85.7	93.7
0.93	77.6, 81.6	79.6







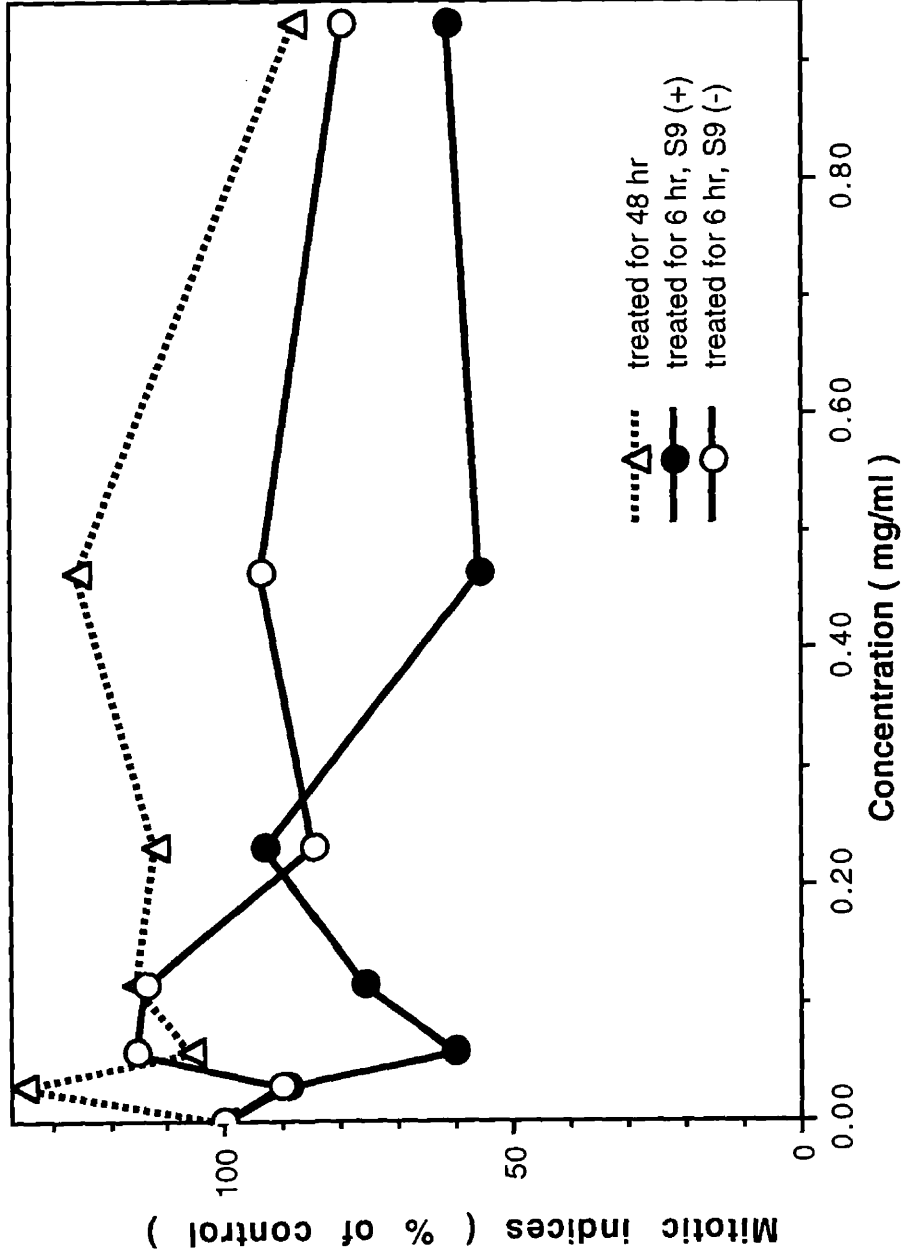


Fig. 1 Mitotic indices of CHL cells treated with 1-chlorobutane