



チモールのチャイニーズ・ハムスター  
培養細胞を用いる染色体異常試験

厚生省生活衛生局 委託

財団法人食品薬品安全センター

秦野研究所

# [目 次]

	頁
要 約 -----	1
緒 言 -----	2
材料および方法 -----	3
1. 使用した細胞 -----	3
2. 培養液の調製 -----	3
3. 培養条件 -----	3
4. 被験物質および陽性対照物質 -----	3
5. 被験物質の調製 -----	4
6. 試験条件 -----	5
7. 細胞増殖抑制試験 -----	5
7.1 処理条件-----	5
7.2 標本作製法 -----	6
7.3 増殖抑制の指標とその結果 -----	6
8. 本試験の群構成 -----	6
8.1 連続処理 (S9 mix非存在下) -----	7
8.2 短時間処理 (S9 mix存在下および非存在下) -----	7
9. 染色体標本作製法 -----	8
10. 染色体分析 -----	8
11. 記録と判定 -----	9
結 果 -----	10
結 論 -----	10
特記事項 -----	11
文 献 -----	11
Tables 1~5	
Figures 1~4	

## [要 約]

チモールの*in vitro* 染色体異常誘発性を、チャイニーズ・ハムスター培養細胞 (CHL/IU) を用いて検討し、陽性の結果を得た。

連続処理 (48時間) における50%を越える増殖抑制濃度は、0.080 mg/ml、短時間処理 (6時間) における S9 mix 存在下および S9 mix 非存在下では、ともに 0.070 mg/ml であった。これらの増殖抑制濃度が近似していたため、連続処理および短時間処理ともに 0.080 mg/ml の濃度を最高処理濃度とした。最高処理濃度の1/2および1/4を、それぞれ中濃度および低濃度として設定した。連続処理では、S9 mix 非存在下で24時間および48時間処理後標本を作製し染色体分析を行った。短時間処理では S9 mix 存在下および非存在下で 6時間処理後、新鮮な培養液でさらに18時間培養して標本を作製し、染色体分析を行った。

CHL/IU 細胞を24時間および48時間連続処理した高濃度群 (0.080 mg/ml) において、細胞毒性のために十分な細胞数を分析できなかったが、その他のいずれの処理群においても、染色体の構造異常や倍数性細胞の誘発作用は認められなかった。CHL/IU細胞を S9 mix 非存在下で 6時間処理した場合、細胞毒性のために十分な細胞数を分析できなかった高濃度群 (0.080 mg/ml) を除き、その他の処理群においては、染色体の構造異常や倍数性細胞の誘発作用は認められなかった。一方、S9 mix 存在下の処理群においては、倍数性細胞の誘発作用は認められなかったが、高濃度群 (0.080 mg/ml) で染色体の構造異常が有意に増加した。

## [緒 言]

OECD既存化学物質安全性点検に係る毒性調査事業の一環として、チモールの培養細胞に及ぼす細胞遺伝学的影響を評価するため、チャイニーズ・ハムスター培養細胞（CHL/IU）を用いて試験管内染色体異常試験を実施した。

本試験は、「新規化学物質に係る試験の方法について」（昭和62年3月31日、環保業第237号、薬発第306号、62基局第303号）および「OECD 毒性試験ガイドライン：473」に準拠し、「化学物質 GLP基準」（昭和59年3月31日、環保業第39号、薬発第229号、59基局第85号、改訂昭和63年11月18日、環企研第233号、衛生第38号、63基局第823号）に基づいて実施した。

## [材料および方法]

### 1. 使用した細胞

リサーチ・リソースバンク (JCRB) から入手 (1988年2月、入手時：継代 4代、現在12代) したチャイニーズ・ハムスター由来の CHL/IU細胞を、解凍後継代10代以内で試験に用いた。

この CHL/IU 細胞株は、一般的に化学物質に対して染色体異常の検出感度が高いため、常用されている。

### 2. 培養液の調製

培養には、牛胎児血清 (FCS: Biocell、ロット番号: 4001776) を10%添加したイーグル MEM 培養液を用いた。MEM 培養液は、イーグル MEM 培地「ニッスイ」①粉末 (日水製薬 (株)) 9.4 g を 1 ℓ の蒸留水に溶解し、121℃で15分間、高圧蒸気滅菌したのち、L-グルタミン (滅菌済み、日水製薬 (株)) 300 mg と10% NaHCO<sub>3</sub> 溶液、約 12.5 ml を加えて調製した。2 倍濃度の MEM 培養液は、上記の培地 9.4 g を 500 ml の蒸留水に溶解し、以下 MEM 培養液と同様に調製した。

### 3. 培養条件

2×10<sup>4</sup> 個の CHL/IU 細胞を、培養液 5 ml を入れたディッシュ (径 6 cm、Corning) に播き、37℃の CO<sub>2</sub> インキュベーター (5% CO<sub>2</sub>) 内で培養した。

### 4. 被験物質および陽性対照物質

#### [被験物質]

チモール (以下 TM と略す、CAS No. 89-83-8) は、分子量150.22の白色結晶の物質である。物理化学的性質等は Appendix 1 に示した。用いた被験物質は、ロット番号純度98.0%以上 (不純物: 不揮発物0.05%以下、他のフェノール類限度内) であり、

から購入 (カタログNo.: 200-01405) した。被験物質は、使用時まで室温で保管した。

TM のジメチルスルホキシド (DMSO) 中での安定性試験を秦野研究所において実施した。

当研究所で実施した復帰突然変異試験 (M-94-079) で調製した低濃度 (156.3  $\mu\text{g}/\text{ml}$ ) 溶液と高濃度 (20.00  $\text{mg}/\text{ml}$ ) 溶液について、室温遮光条件下で、調製後 4 時間までの安定性を調べた。その結果、調製 4 時間後における各濃度の平均含量は、それぞれ初期値 (0 時間) の平均値に対して、101 および 102% であった。これらの値は当研究所で規定している基準 (平均含量が初期値の 90.0% 以上) を満たしていた (Appendix 2)。

#### [陽性対照物質]

##### 1) 連続処理の試験に用いる物質

(化 学 名) マイトマイシン C  
(略 号) MC  
(ロ ッ ト 番 号) 978ADH  
(製 造 者) 協和醗酵工業(株)  
(保 管 条 件) 冷蔵保管

##### 2) 短時間処理の試験に用いる物質

(化 学 名) シクロホスファミド  
(略 号) CPA  
(ロ ッ ト 番 号) 70H0948  
(製 造 者) Sigma Chemical Co.  
(保 管 条 件) 冷蔵保管

#### 5. 被験物質の調製

被験物質の調製は、使用のつど行った。溶媒は DMSO (ロット番号: KCN1642) を用いた。原体を溶媒に溶解してメスアップにより原液 (増殖抑制試験では 20  $\text{mg}/\text{ml}$  および 300  $\text{mg}/\text{ml}$ 、染色体異常試験では 16  $\text{mg}/\text{ml}$ ) を調製し、ついで原液を溶媒で順次希釈して所定の濃度の被験物質調製液を作製した。被験物質調製液は、すべての試験において培養液の 0.5% (v/v) になるように加えた。染色体異常試験においては、連続処理および短時間処理に用いた高濃度群と低濃度群の被験物質調製液について、含量測定を秦野研究所分析化学研究室において行った。その結果、調製液の濃度は、いずれも当研究

所の規定している基準（溶媒中での平均含量が添加量の90.0～110%）の範囲内であった（Appendix 3）。

## 6. 試験条件

連続処理では、細胞を3日間培養したのち培養液を捨て、ディッシュに培養液5 mlと各濃度の被験物質調製液0.025 mlを加え、24時間および48時間処理した。

短時間処理では、細胞を3日間培養したのち培養液を捨て、MEM 培養液、2倍濃度のMEM 培養液およびS9 mix をそれぞれ4:1:1の割合で混合した溶液3 mlをディッシュに加えた。また、S9 mix 非存在下の処理群においては、MEM培養液3 mlをディッシュに加え、さらに0.015 mlの被験物質調製液を加えて6時間処理した。処理終了後、新鮮な培養液に交換し、さらに18時間培養した。S9 mix の調製は下記の組成で行った。

S9*	3
20 mM HEPES (pH 7.2)	2
50 mM MgCl <sub>2</sub>	1
330 mM KCl	1
50 mM G-6-P	1
40 mM NADP	1
蒸留水	1
合計 10 ml	

\* S9 : Sprague-Dawley 系ラットにフェノバルビタールと5,6-ベンゾフラボンを投与して調製したキッコマン(株)のS9（ロット番号：RAA-314, 1994年8月製造）を購入し、使用時まで-80℃の超低温槽内に保存した。

## 7. 細胞増殖抑制試験

染色体異常試験に用いる被験物質の処理濃度を決定するため、被験物質の細胞増殖に及ぼす影響を調べた。

### 7.1 処理条件

連続処理では48時間処理について、また、短時間処理ではS9 mix 存在下および非存在下の6時間処理群について細胞増殖抑制試験を実施した。連続処理において、0.047～1.5 mg/ml（10 mM）の濃度範囲で予備検討を実施したが、0.047 mg/mlの処理濃度群で強い増殖抑制が認められたため、処理濃度は0.0031～0.10 mg/mlの範囲の濃度を用いた。短時間

処理では 0.047 ~ 1.5 mg/ml (10 mM) の範囲の濃度を用いた。ディッシュは 1 濃度について 2 枚用いた。

## 7.2 標本作製法

培養終了後、培養液を捨てたのち、10%ホルマリン溶液を加え、細胞がディッシュに付着した状態で固定した。固定後、0.1%クリスタルバイオレット液で染色した。

## 7.3 増殖抑制の指標とその結果

被験物質の CHL/IU 細胞に対する増殖抑制作用は、単層培養細胞密度計 (Monocellater™、オリンパス光学工業 (株)) を用いて各群の増殖度を計測し、被験物質処理群の溶媒対照群に対する細胞増殖の比をもって指標とした。

その結果、連続処理における 50% を明らかに越える増殖抑制濃度 (60% の増殖抑制濃度) を、60% の増殖抑制濃度をはさむ 2 濃度より算出したところ、約 0.080 mg/ml であった。短時間処理の S9 mix 存在下および S9 mix 非存在下における 50% を明らかに越える増殖抑制濃度は、ともに約 0.070 mg/ml であった (Table 1、2、3 および Fig.1、2)。

なお、S9 mix 存在下では、高濃度になると増殖率の上昇が認められたが、これはディッシュ底面へ、S9 ないしは被験物質と思われる沈殿物が付着したことによるものと考えられた。

## 8. 本試験の群構成

細胞増殖抑制試験の結果より、連続処理と短時間処理における 50% の増殖抑制濃度を明らかに越える濃度は互いに近似していたことから、染色体異常試験における連続処理と短時間処理の高濃度群は、ともに 0.080 mg/ml とし、それぞれ高濃度群の 1/2 の濃度を中濃度、1/4 の濃度を低濃度とした。陽性対照物質として用いた MC および CPA は、注射用水 ((株) 大塚製薬工場、ロット番号: K4C85) に溶解して調製した。それぞれ染色体異常を誘発することが知られている濃度を適用した。



### 8.1 連続処理 (S9 mix 非存在下)

連続処理では、24時間と48時間処理の3段階の被験物質処理濃度群に、対照群を含め下記の11群を設けた。各群2枚のディッシュを用いた。

群	濃度 (mg/ml)	処理時間 (h)
1) 無処理対照	—	—
2) 溶媒対照	0	24
3) TM	0.020	24
4) TM	0.040	24
5) TM	0.080	24
6) 陽性対照 (MC)	0.00005	24
7) 溶媒対照	0	48
8) TM	0.020	48
9) TM	0.040	48
10) TM	0.080	48
11) 陽性対照 (MC)	0.00005	48

### 8.2 短時間処理 (S9 mix 存在下および非存在下)

短時間処理では、S9 mix 存在下および非存在下の3段階の被験物質処理濃度群に、対照群を含め、下記の11群を設けた。各群2枚のディッシュを用いた。

群	濃度 (mg/ml)	S9 mix の有無	処理時間(h)
1) 無処理対照	—	—	—
2) 溶媒対照	0	—	6-(18)
3) TM	0.020	—	6-(18)
4) TM	0.040	—	6-(18)
5) TM	0.080	—	6-(18)
6) 陽性対照 (CPA)	0.005	—	6-(18)
7) 溶媒対照	0	+	6-(18)
8) TM	0.020	+	6-(18)
9) TM	0.040	+	6-(18)
10) TM	0.080	+	6-(18)
11) 陽性対照 (CPA)	0.005	+	6-(18)

## 9. 染色体標本作製法

- 1) 培養終了の2時間前に、コルセミドを最終濃度が約  $0.1 \mu\text{g/ml}$  になるように培養液に加え、培養終了後、各群の細胞をリン酸緩衝生理食塩液 ( $\text{Ca}^{++}$ 、 $\text{Mg}^{++}$  を含まない) で洗い、ピペティングにより細胞をはがし、10 ml の遠沈管に集めた。
- 2) 1000~1200 rpm で5分間遠沈し、上清を捨てたのち、沈殿した細胞に3 ml の 0.075 M KCl 水溶液を加えることにより約30分間低張処理を行った。
- 3) 低張処理後、低張液の上層に固定液 (氷酢酸:メタノール = 1:3 v/v) 約 6 ml を加え、下方から静かにピペティングしながら混和して固定し、その後1000~1200 rpm で5分間遠沈した。
- 4) 遠沈後上清を除き、再び新鮮な固定液を加えて細胞をピペティングにより再浮遊させ、1000~1200 rpm で5分間遠沈した。この操作を数回繰り返した。
- 5) 遠沈して得た白色の細胞塊に、0.2~0.5 ml の固定液を加え、十分に懸濁させた。
- 6) 細胞浮遊液の少量を、あらかじめ洗浄しておいたスライドグラス上に滴下し、そのまま風乾した。
- 7) スライド標本は各ディッシュにつき6枚作製した。
- 8) スライドグラスのフロスト部分に鉛筆で、試験系識別番号、コード番号およびスライド番号を記入した。
- 9) 乾燥したスライドは、ギムザ原液 (Merck) 4.5 ml を M/15 リン酸緩衝液 (pH 6.8) 150 ml に希釈した染色液で約8分間染色後、蒸留水で軽くすすいで風乾した。
- 10) 染色したスライド標本は、コード番号順にスライドケースに入れ、ケースには試験系識別番号、標本作製の日付を明示して保存した。

## 10. 染色体分析

作製したスライド標本のうち、1つのディッシュから得られた異なるスライドを、複数の観察者がそれぞれ処理条件が分からないようにコード化した状態で分析した。よく広がり、かつ染色体が散逸していない分裂中期像を探し、異常を有する細胞については、スライド上のその位置を顕微鏡のステージの位置で記録用紙に記録した。

染色体の分析は、日本環境変異原学会、哺乳動物試験 (MMS) 分科会<sup>1)</sup> による分類法に基づいて行い、染色体型あるいは染色分体型のギャップ、切断、交換などの構造異常と倍数性細胞 (polyploid) の有無について観察した。また原則として構造異常については1

群200個、倍数性細胞については1群800個の分裂中期細胞を分析することとした。

## 11. 記録と判定

無処理対照、溶媒および陽性対照群と被験物質処理群のそれぞれについて観察細胞数、構造異常の種類と数、倍数性細胞の数などの分析結果を集計し、各群の値を記録用紙に記入した。

染色体異常を持つ細胞の出現頻度については、林<sup>2)</sup>の方法を参考にして、溶媒の背景データと被験物質処理群間でフィッシャーの直接確率法<sup>3)</sup>により、多重性を考慮し、familywiseの有意水準を5%として検定を実施した。フィッシャーの直接確率法で有意差が認められた場合には、用量依存性に関してコ克蘭・アーミテッジの傾向性検定<sup>4)</sup> ( $p < 0.05$ ) を行った。以上2回の検定でともに有意差が認められた場合を陽性とした。傾向性検定で有意差が認められない場合には疑陽性とした。観察細胞数が、構造異常については100個未満、倍数性細胞については400個未満の場合を細胞毒性のため判定不能とした。

なお、DMSOを0.5% (v/v) 添加した場合の、gapを含む構造異常 (TAG) と数的異常に関する秦野研究所における背景データ (1989~1994年) は以下の通りである。

群	構造異常				数的異常			
	試験数	観察細胞数	異常細胞数	平均値* ±SD	試験数	観察細胞数	倍数性細胞数	平均値** ±SD
(連続処理)								
24時間	30	6000	36	1.2±1.1	30	24000	83	2.8±2.2
48時間	29	5800	52	1.8±1.5	29	23200	70	2.4±1.8
(短時間処理)								
S9 mix 非存在下	19	3800	26	1.4±1.1	19	15200	31	1.6±1.2
S9 mix 存在下	20	4000	42	2.1±2.0	20	16000	38	1.9±1.4

\* ; 200細胞あたりの平均異常細胞数

\*\* ; 800細胞あたりの平均倍数性細胞数

## [結 果]

連続処理による染色体分析の結果を Table 4 および Fig. 3 に示した。

TM を24時間連続処理した高濃度群 (0.080 mg/ml) では、細胞毒性のため十分な細胞数を分析できなかつた。また、48時間連続処理した高濃度群 (0.080 mg/ml) については細胞毒性のため分析できなかつた。その他の処理群 (0.020~0.040 mg/ml) においては、染色体の構造異常および倍数性細胞の誘発は認められなかつた。

短時間処理による染色体分析の結果を Table 5 および Fig. 4 に示した。

TM を6時間処理した場合、S9 mix 非存在下の高濃度群 (0.080 mg/ml) では、細胞毒性のため十分な細胞数を分析できなかつたが、その他の処理群 (0.020 および 0.040 mg/ml) では染色体の構造異常および倍数性細胞の誘発作用は認められなかつた。一方、S9 mix 存在下では、いずれの処理群においても倍数性細胞の誘発作用は認められなかつたが、高濃度群 (0.080 mg/ml) で染色体の構造異常を有する細胞が有意 ( $P < 0.005$ ) に増加し、傾向性検定の結果でも有意差が認められた。

陽性対照として用いた連続処理での MC 処理群および S9 mix 存在下での CPA 処理群では染色体分体交換 (cte) や染色体分体切断 (ctb) などの構造異常をもつ細胞が誘発された。

## [結 論]

CHL/IU 細胞をチモールで24時間および48時間連続処理した場合 (0.020 および 0.040 mg/ml) 、また、S9 mix 非存在下で6時間処理した場合 (0.020 および 0.040 mg/ml) 、染色体の構造異常や倍数性細胞は誘発されなかつた。一方、S9 mix 存在下で6時間処理した場合、高濃度群 (0.080 mg/ml) で染色体の構造異常を有する細胞は有意に増加した。

従って、チモールは、上記の試験条件下で、試験管内の CHL/IU 細胞に染色体異常を誘発すると結論した。

## [特記事項]

本試験の実施にあたり、試験の信頼性に悪影響を及ぼす疑いのある予期し得なかった事態及び試験計画書からの逸脱はなかった。

## [文 献]

- 1) 日本環境変異原学会・哺乳動物試験分科会編：化学物質による染色体異常アトラス、朝倉書店、（1988）
- 2) 林 真：染色体異常試験の統計学的処理、変異原性試験、1：255 - 261（1992）
- 3) 吉村 功 編著：毒性・薬効データの統計解析、事例研究によるアプローチ、サイエンティスト社、（1987）
- 4) 吉村 功、大橋 靖夫 責任編集：毒性試験講座14、毒性試験データの統計解析、地人書館、P218～223、（1992）

Table 1 Growth inhibition of CHL/IU cells continuously treated with thymol (TM) for 48 h without S9 mix

Concentration of TM (mg/ml)	Cell growth (% of control)		
			Average
0	100 ,	100	100.0
0.0031	92 ,	91	91.5
0.0063	87 ,	83	85.0
0.013	82 ,	81	81.5
0.025	98 ,	96	97.0
0.050	70 ,	89	79.5
0.10	0 ,	0	0.0

Cell growth was measured by Monocellater<sup>TM</sup> (OLYMPUS)

Table 2 Growth inhibition of CHL/IU cells treated with thymol (TM) for 6 h with S9 mix

Concentration of TM (mg/ml)	Cell growth (% of control)		
			Average
0	100 ,	100	100.0
0.047	85 ,	69	77.0
0.094	0 ,	3	1.5
0.19	19 ,	10	14.5
0.38	30 ,	30	30.0
0.75	66 ,	97	81.5
1.5	64 ,	71	67.5

Cell growth was measured by Monocellater<sup>TM</sup> (OLYMPUS)

Table 3 Growth inhibition of CHL/IU cells treated with thymol (TM)  
for 6 h without S9 mix

Concentration of TM (mg/ml)	Cell growth (% of control)		
			Average
0	100 ,	100	100.0
0.047	64 ,	69	66.5
0.094	0 ,	0	0.0
0.19	0 ,	0	0.0
0.38	0 ,	0	0.0
0.75	7 ,	7	7.0
1.5	9 ,	7	8.0

Cell growth was measured by Monocellater<sup>TM</sup> (OLYMPUS)

Table 4 Chromosome analysis of Chinese hamster cells (CHL/IU) continuously treated with thymol (TM)\* without S9 mix

Group	Concent- ration (mg/ml)	Time of exposure (h)	No. of cells analysed	No. of structural aberrations							No. of cells with aberrations		Trend test						
				gap	ctb	cte	csb	cse	mul	total	Others	TAG (%)	TA (%)	SA	NA				
Control <sup>1)</sup>			200	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	( 0.5 )	1	( 0.5 )	0.50		
Solvent	0	24	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	( 0.0 )	0	( 0.0 )	0.13		
TM	0.020	24	200	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	( 0.5 )	0	( 0.0 )	0.38		
TM	0.040	24	200	2	0	1	0	0	0	3	3	3	3	( 1.5 )	1	( 0.5 )	0.00	NT	NT
TM	0.080	24	15 <sup>T</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	( 0.0 )	0	( 0.0 )	0.00	0 <sup>T</sup>	
MC	0.00005	24	200	3	29	61	0	4	0	97	0	72	72	( 36.0 )	70	( 35.0 )	0.00		
Solvent <sup>1)</sup>	0	48	200	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	( 0.5 )	1	( 0.5 )	0.38		
TM	0.020	48	200	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	( 0.5 )	1	( 0.5 )	0.13		
TM	0.040	48	200	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	( 0.0 )	0	( 0.0 )	0.63		NT
TM	0.080	48	0 <sup>T</sup>																
MC	0.00005	48	200	4	31	59	0	1	20	115	5	60	60	( 30.0 )	57	( 28.5 )	0.75		


Abbreviations : gap : chromatid gap and chromosome gap, ctb : chromatid break, cte : chromatid exchange, csb : chromosome break, cse : chromosome exchange (dicentric and ring etc.), mul : multiple aberrations, TAG : total no. of cells with aberrations, TA : total no. of cells with aberrations except gap, SA : structural aberration, NA : numerical aberration, MC : mitomycin C, NT : not tested, T : Toxic; this group was excluded from judgement in case of less than one hundred cells for structural aberration analysed or less than four hundred cells for polyploid cells analysed. 1) Dimethyl sulfoxide was used as solvent. 2) More than ten aberrations in a cell were scored as 10. 3) Others, such as attenuation and premature chromosome condensation, were excluded from the no. of structural aberrations. 4) Eight hundred cells were analysed in each group. 5) Cochran - Armitage's trend test was done at  $p < 0.05$  when the incidence of TAG or polyploid in the treatment groups was significantly different from historical solvent control at  $p < 0.05$  by Fisher's exact test. 6) Forty cells were analysed. \* : Purity was more than 98.0 %. Unvolatile materials ( $\leq 0.05\%$ ) and other kinds of phenol ( $\leq 1.95\%$ ) were contained as impurities.




Table 5 Chromosome analysis of Chinese hamster cells (CHL/IU) treated with thymol (TM)\*\* with and without S9 mix

Group	Concent- ration (mg/ml)	S9 mix	Time of exposure (h)	No. of structural aberrations							No. of cells with aberrations		Trend test <sup>5)</sup>					
				analysed	gap	ctb	cte	cse	mul	total	Others <sup>3)</sup>	TAG (%)	TA (%)	Polyploid <sup>4)</sup> (%)	SA	NA		
Control <sup>1)</sup>				200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
Solvent	0	-	6-(18)	200	1	0	0	1	0	2	0	2	2	1	1	0.13		
TM	0.020	-	6-(18)	200	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0.38		
TM	0.040	-	6-(18)	200	1	0	0	0	10	11	0	2	2	1	1	0.00	NT	NT
TM	0.080	-	6-(18)	77 <sup>T</sup>	1	1	2	0	0	4	0	4	4	3	3	0.58 <sup>6)</sup> T		
CPA	0.005	-	6-(18)	200	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0.13		
Solvent <sup>1)</sup>	0	+	6-(18)	200	1	1	0	1	0	3	0	3	3	2	2	0.25		
TM	0.020	+	6-(18)	200	1	1	0	0	0	2	1	2	2	1	1	0.13		
TM	0.040	+	6-(18)	200	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0.13		+
TM	0.080	+	6-(18)	200	1	5	7	0	2	15	0	11*	11*	10	10	0.75		NT
CPA	0.005	+	6-(18)	200	10	193	272	1	1	360	1	176	176	175	175	0.00		


Abbreviations : gap : chromatid gap and chromosome gap, ctb : chromatid break, cte: chromatid exchange, cse : chromosome break, cse : chromosome exchange (dicentric and ring etc.), mul : multiple aberrations, TAG : total no. of cells with aberrations, TA : total no. of cells with aberrations except gap, SA : structural aberration, NA : numerical aberration, CPA : cyclophosphamide, NT: not tested, T: Toxic; this group was excluded from judgement in case of less than one hundred cells for structural aberration analysed or less than four hundred cells for polyploid cells analysed. 1) Dimethyl sulfoxide was used as solvent. 2) More than ten aberrations in a cell were scored as 10. 3) Others, such as attenuation and premature chromosome condensation, were excluded from the no. of structural aberrations. 4) Eight hundred cells were analysed in each group. 5) Cochran - Armitage's trend test was done at  $p < 0.05$ . 6) One hundred and seventy-three cells were analysed. \* : Significantly different from historical solvent control data with respect to TAG and polyploid at  $p < 0.05$  by Fisher's exact test using a Bonferroni correction for multiple comparisons. \*\* : Purity was more than 98.0 %. Unvolatile materials ( $\cong 0.05$  %) and other kinds of phenol ( $\cong 1.95$  %) were contained as impurities.

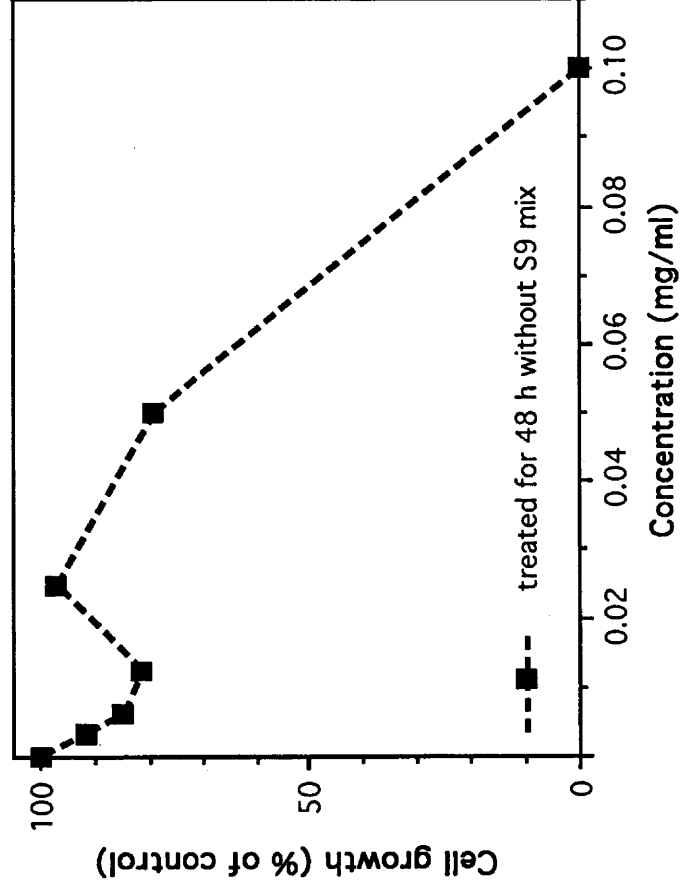


**Fig. 1** Growth inhibition of CHL/IU cells continuously treated with thymol

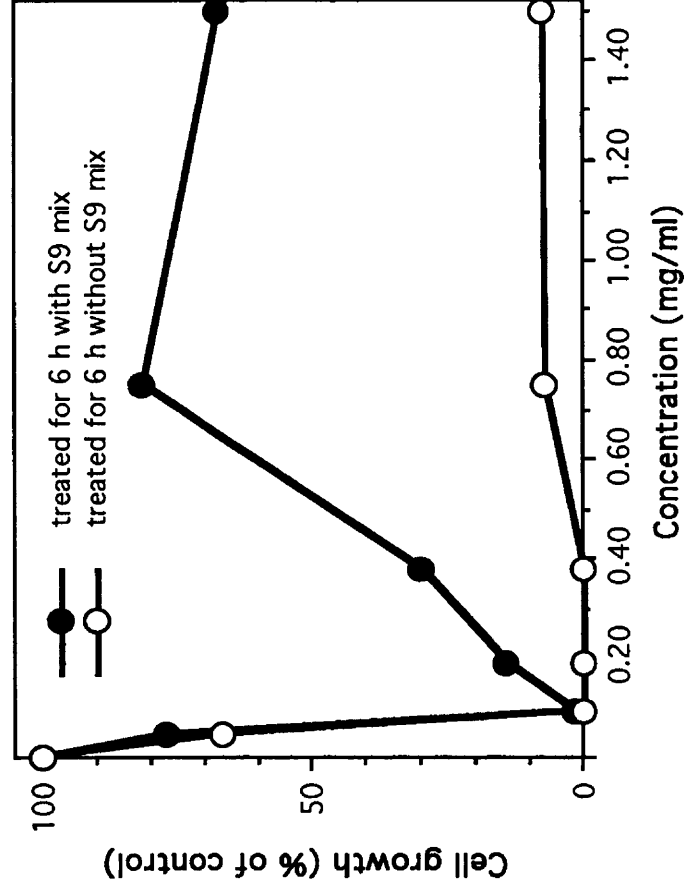

**Fig. 2** Growth inhibition of CHL/IU cells treated with thymol

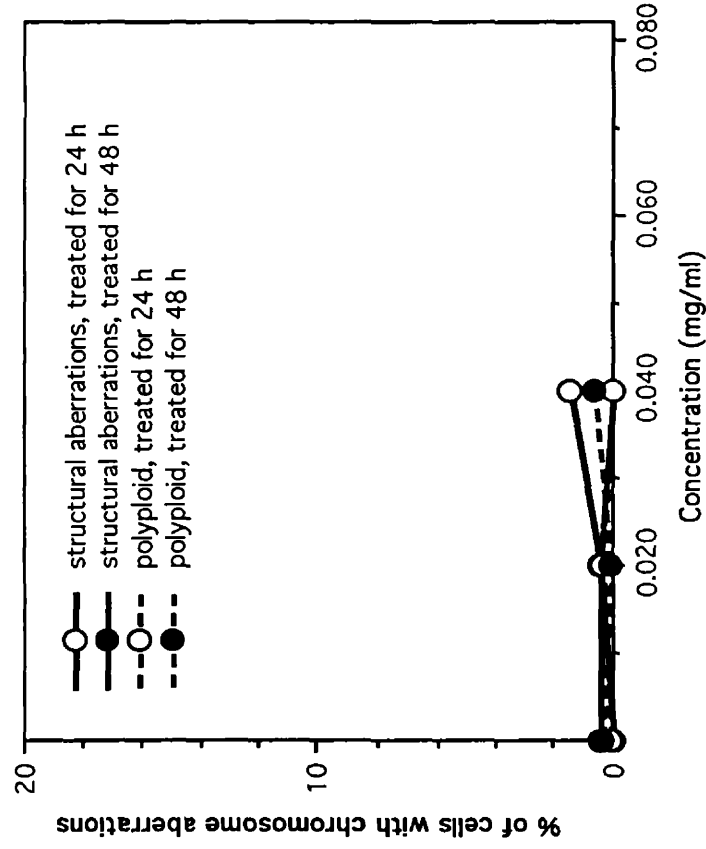

**Fig. 3** Induction of chromosome aberrations in CHL/IU cells continuously treated with thymol without S9 mix

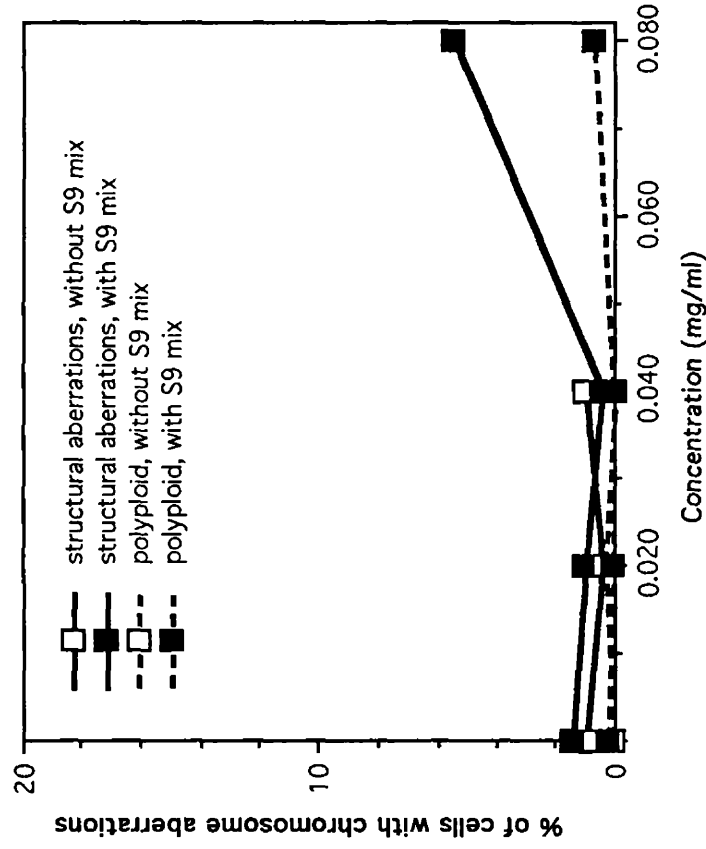

**Fig. 4** Induction of chromosome aberrations in CHL/IU cells treated with thymol for 6 h with and without S9 mix